


Cordis[®]

NEON[®] Pro
NEON[®] NC Pro

PTCA Balloon Dilatation Catheter

The Art of Flow Restoration

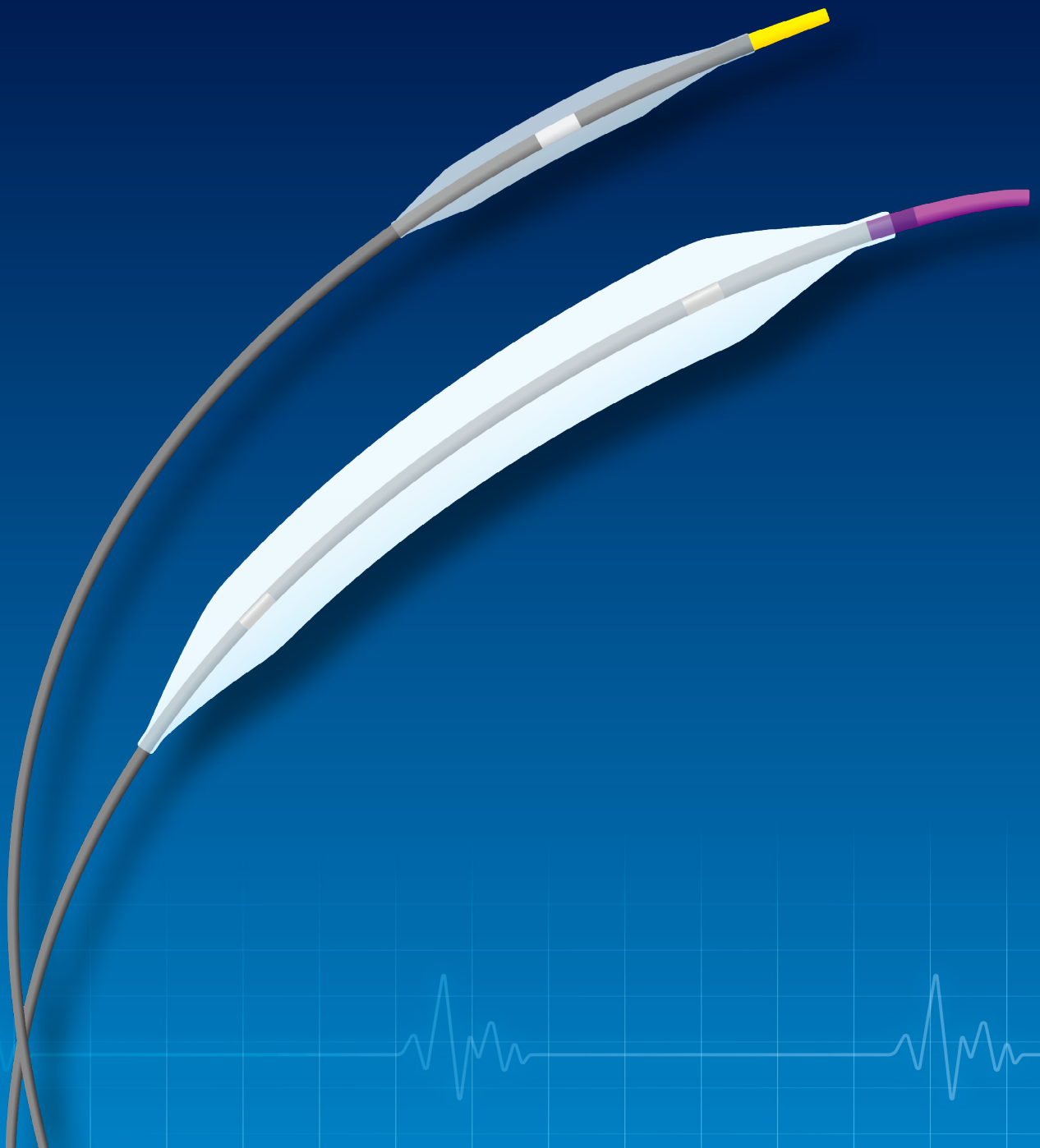

NEON[®] Pro / NEON[®] NC Pro


PTCA Balloon Dilatation Catheter

NEON[®] Pro

病変を選ばない滑らかな通過性

滑らかな先端チップ


新たなテクノロジーにより、
ロープファイルで滑らかにテーパしたチップを実現。
多様な病変で優れた通過性を実現します。

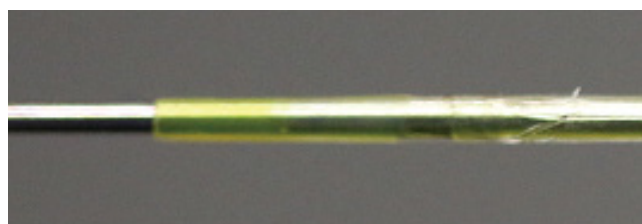

NEON[®] Pro


優れた潤滑性

親水性コーティング技術の改良により、優れた潤滑性を実現。
高度屈曲部位における摩擦抵抗を低減し、
スムーズな病変通過に貢献します。

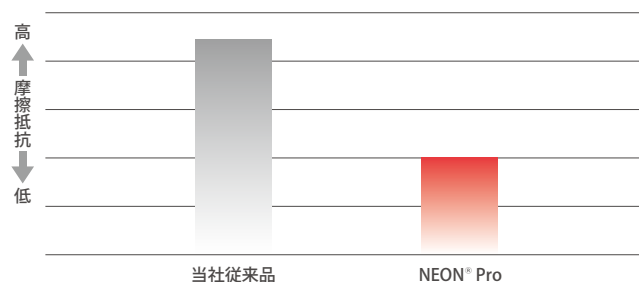

測定方法: 37℃温水中にカテーテルを設置し、血管狭窄モデル内で
シャフトを撓動した際にカテーテルに発生した荷重を測定
デバイス: 当社従来品、NEON[®] Pro

優れた通過性 (Φ1.00mm)

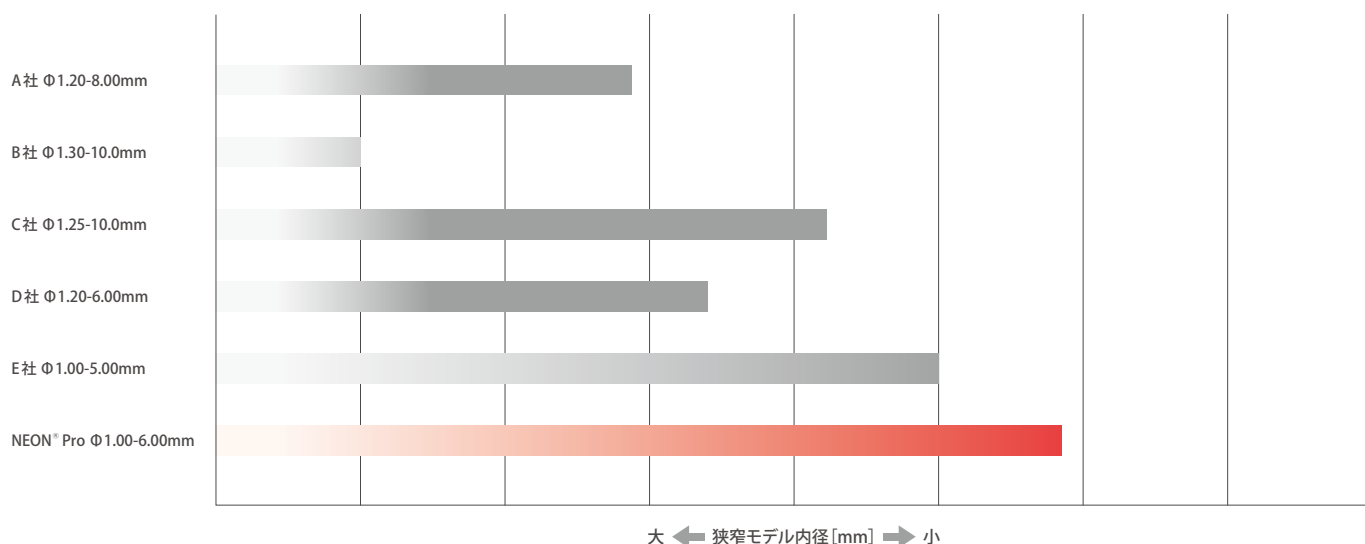


NEON[®] NC Pro

スムーズで正確なステント後拡張

ステント後拡張に安心して使用


バルーンの直管長はRBPで両マーカの外側に一致します。バルーンでステントの外側の血管壁に損傷を与えることなく、安心してRBPまで加圧して、ステント後拡張を行うことができます。

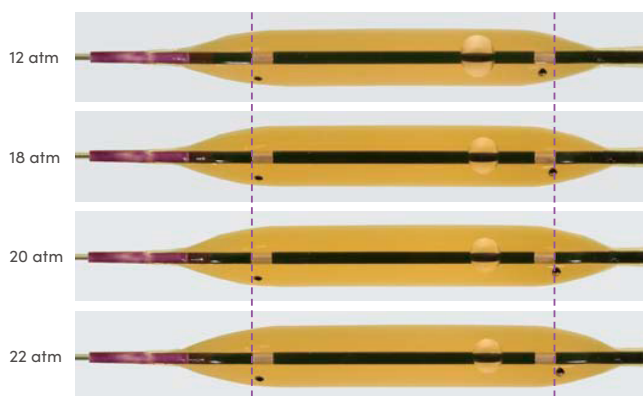

NEON[®] NC Pro 3.0×15
注意：写真に示す黒点間がバルーン直管部分を示す。赤点線はバルーンマーカの外側を示す。

使いやすいローコンプライアンス


bp22の耐圧性能に対する高い信頼を維持した変わらぬローコンプライアンス特性は、病変部をしっかりと拡張し、ステントの正確な留置に貢献し、より良いClinical Outcomeを導きます。

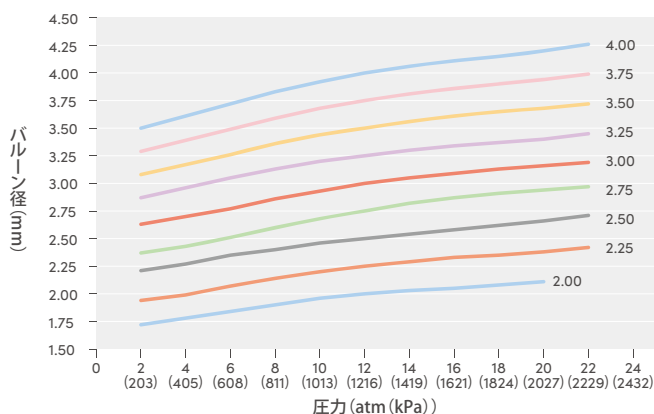

NEON[®] NC ProのPressure Working Rangeは非常に広いにもかかわらず、3.0mmバルーンのNominalからRBPの外径変化は0.19mm (3.00→3.19mm)です。

High Pressure Balloonとは思えないLow Profile

High Pressure Balloon (RBP 22atm)とは思えない細いバルーンプロフィール (3.00mmバルーンのバルーンプロフィール実測値: 0.86mm)はステントの後拡張だけでなく、前拡張にも対応し、幅広い用途でご使用いただけます。

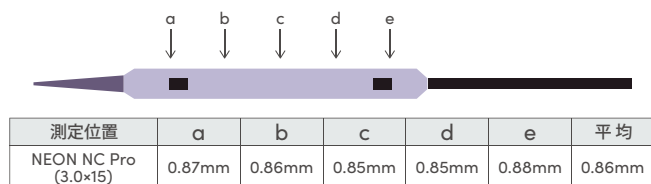

デフレート時の安定したバルーンリラップ性能

安定したバルーンリラップ性能により、Re-Cross時の挿入抵抗の低減を実現し、正確なステント後拡張へつなげます。耐久性が向上した新しい親水性コーティングと共に、Re-Cross時の挿入抵抗の低減に貢献しています。




NEON[®] NC Pro 3.0×15
注意：バルーンのリラップ形状は、拡張圧、拡張回数、病変部の形状等によって影響を受けます。

NEON[®] Pro / NEON[®] NC Pro

PTCA Balloon Dilatation Catheter


NEON[®] Pro

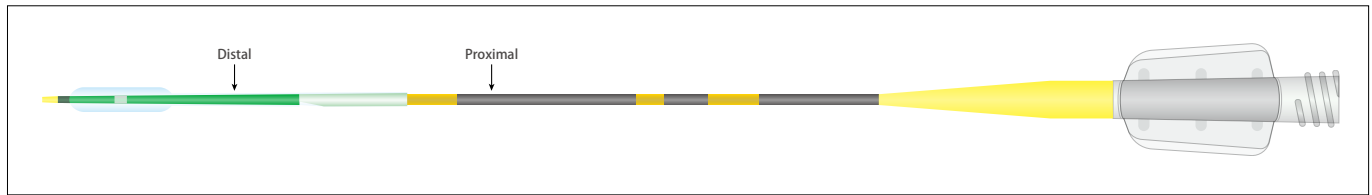

カタログ番号	GTINコード	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	シャフト径 (F) (Distal/Prox.)	ノミナル圧 (atm)	RBP (atm)
NEON-P10006**	04540778171626	1.00	6	2.3/1.8	6	14
NEON-P15010**	04540778171633	1.50	10	2.3/1.8		
NEON-P15015**	04540778171695	1.50	15	2.3/1.8		
NEON-P20015	04540778171701	2.00	15	2.3/1.8		
NEON-P22515**	04540778171718	2.25	15	2.3/1.8		
NEON-P25015	04540778171725	2.50	15	2.3/1.8		
NEON-P27515**	04540778171732	2.75	15	2.3/1.8		
NEON-P30015**	04540778171749	3.00	15	2.5/2.0		

**印のついている製品は在庫終了次第、販売終了となります。

NEON[®] NC Pro

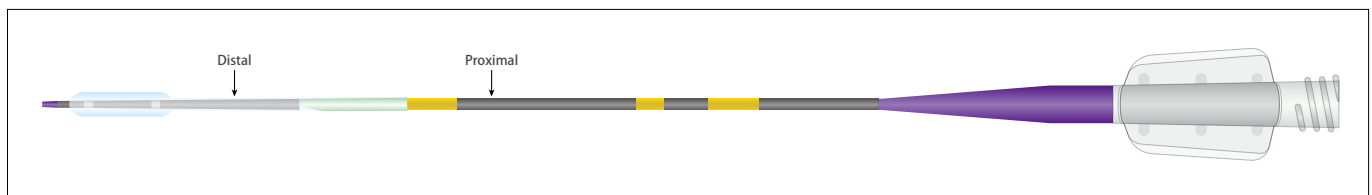

カタログ番号	GTINコード	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	シャフト径 (F) (Distal/Prox.)	ノミナル圧 (atm)	RBP (atm)
NEON-CP20010**	04540778171794	2.00	10	2.5/2.1	12	20
NEON-CP22510**	04540778171800	2.25	10	2.6/2.1		22
NEON-CP25010	04540778171817	2.50	10	2.6/2.1		22
NEON-CP27510	04540778171824	2.75	10	2.6/2.1		22
NEON-CP30010	04540778171831	3.00	10	2.6/2.1		22
NEON-CP32510	04540778171848	3.25	10	2.6/2.1		22
NEON-CP35010	04540778171855	3.50	10	2.7/2.1		22
NEON-CP40010	04540778171879	4.00	10	2.7/2.1		22
NEON-CP20015**	04540778171886	2.00	15	2.5/2.1		20
NEON-CP22515**	04540778171893	2.25	15	2.6/2.1		22
NEON-CP25015	04540778171909	2.50	15	2.6/2.1		22
NEON-CP27515	04540778171916	2.75	15	2.6/2.1		22
NEON-CP30015	04540778171923	3.00	15	2.6/2.1		22
NEON-CP32515	04540778171930	3.25	15	2.6/2.1		22
NEON-CP35015	04540778171947	3.50	15	2.7/2.1		22
NEON-CP40015	04540778171961	4.00	15	2.7/2.1		22

**印のついている製品は在庫終了次第、販売終了となります。

■販売名：NEON Pro PTCAバルーンカテーテル ■承認番号：22600BZX00031A01

■販売名：NEON NC Pro PTCAバルーンカテーテル ■承認番号：22500BZX00347A03

■クラス分類：IV ■JMDNコード：17184024

■特定保険医療材料請求区分：心臓手術用カテーテル/経皮的冠動脈形成術用カテーテル/一般型 ■製造販売元：株式会社カネカ

Cordis

[製造販売元] コーディスジャパン合同会社

本社/〒163-1306 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー6階

全国共通・受注専用フリーダイヤル Tel.0120-978480 Fax.0120-980294

コーディスジャパン
Webサイト

Cordis Circle 検索

